

ESCÁNER INTRAORAL
HeronTM IOS
3DISC



Heron™ IOS

Una solución de escaneado abierta para odontólogos

El sistema Heron IOS, es la solución completa

Un escáner intraoral pequeño y ligero que incluye el paquete de software HeronClinic, compatible con el flujo de trabajo de impresiones odontológicas, que comprende: gestión de casos, escaneado, validación de datos, adición de comentarios y la realización de pedidos.

Un escáner diseñado para adaptarse a la consulta moderna

El escáner Heron IOS está diseñado teniendo en cuenta la ergonomía, ofrece un mango ligero, con un diseño óptimo de agarre y una punta que se puede rotar, también ofrece opciones de primera calidad como la captura de color y un calentador integrado para evitar el empañamiento en las partes ópticas. Con éste escáner intraoral para la toma de impresiones digitales, 3DISC ofrece una solución útil para todas las especialidades odontológicas.

Aplicación HeronClinic creada para la integración

El escáner incluye HeronClinic, una aplicación de software para la gestión de casos y escaneado, así como para el uso compartido en el laboratorio. HeronClinic ofrece funciones que resultan fáciles de usar y que se han diseñado para la colaboración entre clínicas odontológicas y laboratorios. Puede compartir archivos de HeronClinic gracias al modulo HeronCloud basado en la nube, o por correo electrónico.

Un escáner diseñado para adaptarse a la consulta moderna



Fácil para el PACIENTE

- Mayor comodidad
- Menor tiempo de espera
- Menos tiempo en silla



Fácil para el LABORATORIO

- Comunicación rápida y clara
 - Compatibilidad
- Posibilidad de trabajo con sistema de CAD dental abierto




Fácil para el ODONTÓLOGO

- Escaneado en minutos
- Curva de aprendizaje
- Satisface sus necesidades en todas las áreas



Flujo de trabajo digital

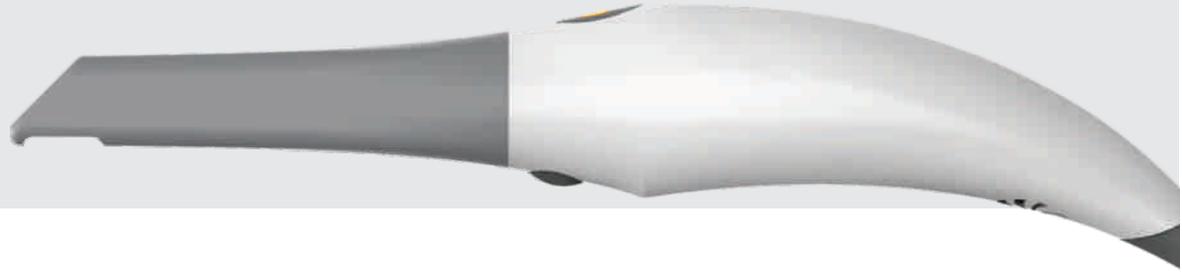

CREACIÓN DEL CASO



ESCANEADO



COMPARTIR CASOS



INTEGRACIÓN DE LABORATORIO Y CAD



Heron™ IOS

THE BEAUTY OF SIMPLICITY

Punta con giro de 360°

Para un ángulo de escaneo óptimo

Punta esterilizable en autoclave


Se incluyen 3 puntas, biocompatibles

Captura de imagen en HD y escaneo a color

24 bits. Sin necesidad de polvos ni pulverizador

Elemento calefactor

Evita el empañamiento en partes ópticas

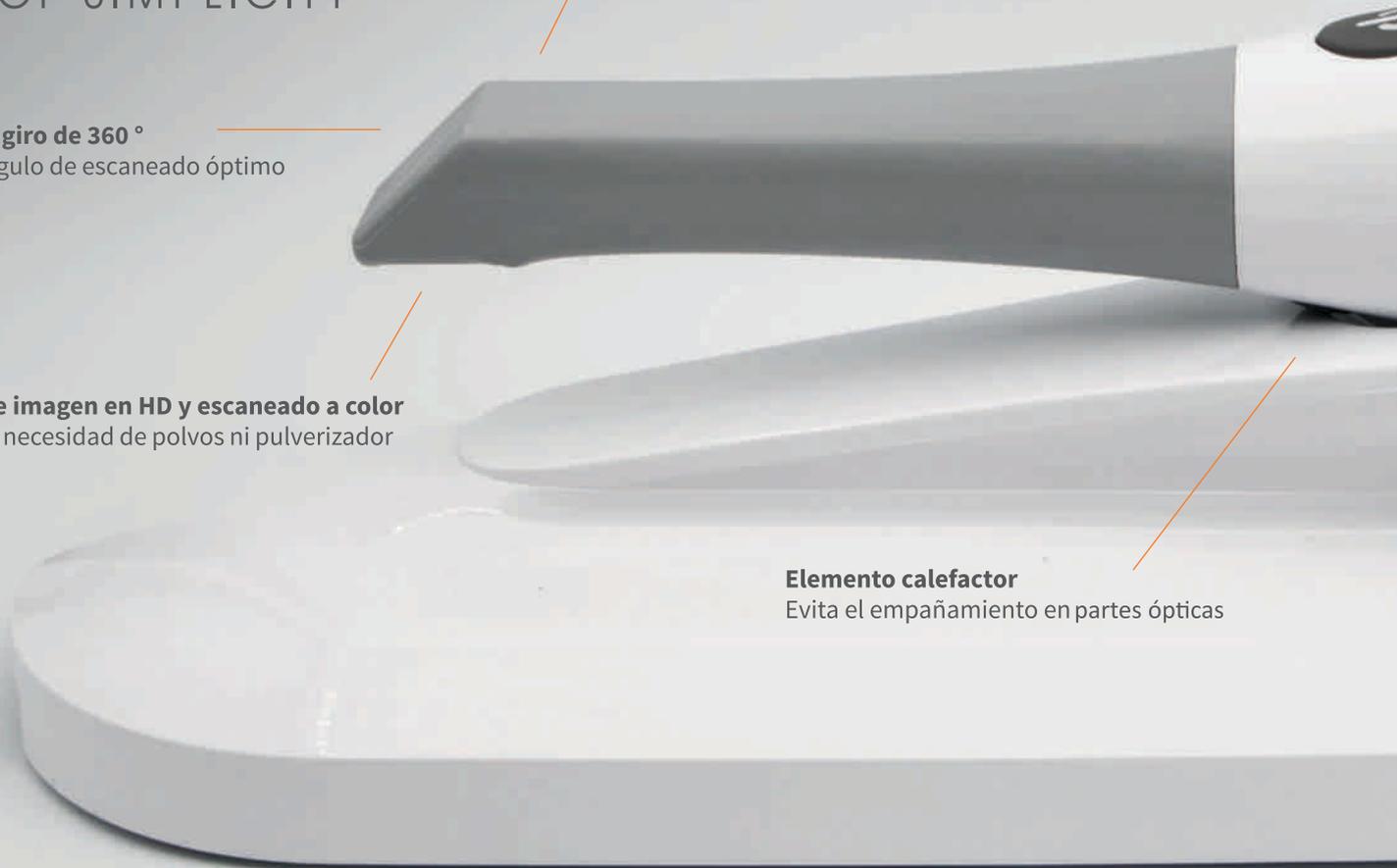



Peso ligero

Pesa solo 150 gramos/5,3 onzas

Garantiza un uso sin esfuerzos en cualquier situación

Un diseño realmente ergonómico

El mejor agarre y flexibilidad posibles para el uso diario

3DISC

Taking Digital Beyond

CONSEJOS PARA UN ESCANEADO EFICIENTE

▪ Mover el tejido:

Retraer los labios, mejillas y lengua para una mejor experiencia.

▪ La primera línea (oclusal) es clave:

Pasar un segundo por diente.

- Para ser exactos, mantenga el escáner en contacto constante.

CONSEJOS ADICIONALES:

▪ Para maxilar superior:



Gire la punta hacia arriba

▪ Al escanear el lado Vestibular:


Primero comience a escanear con un ángulo de 45° entonces vuelva a escanear con un ángulo de 90°.

▪ Para llenar correctamente los agujeros:

Incline el escáner en dirección contraria.

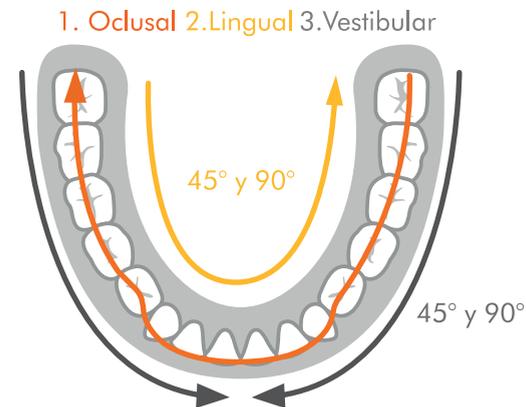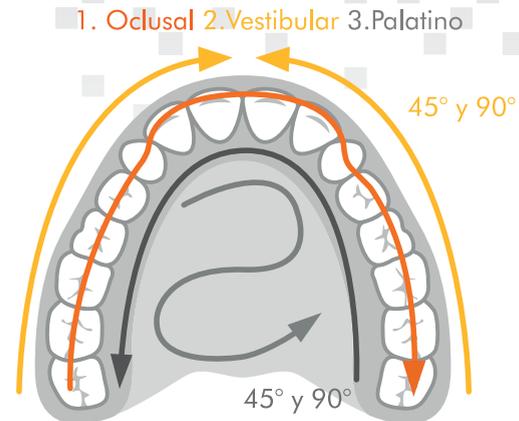


1. Línea Oclusal 2. Encía Superior 3. Encía inferior

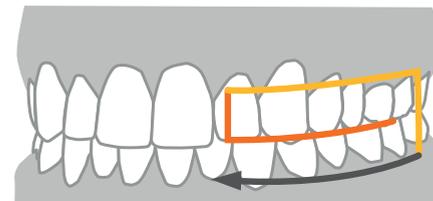

HeronClinic

Software de escaneo y gestión de pedidos

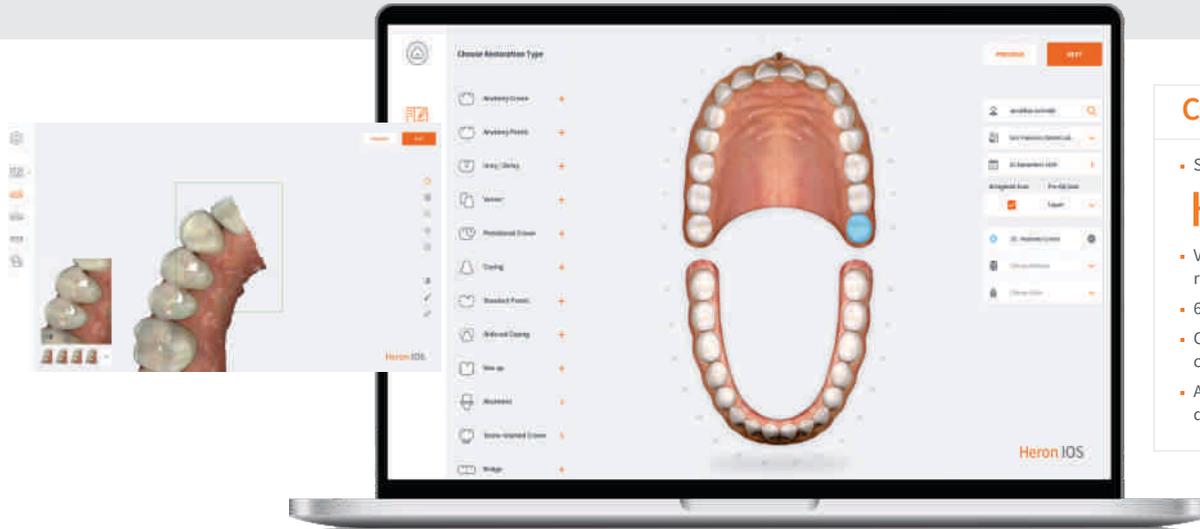

Características destacadas

- Solución de la nube incluida para compartir archivos

HeronCloud 

- Visor de escaneo en 3D con función de comparación para realizar un seguimiento del historial dental del paciente
- 6 idiomas compatibles (En, Es, Da, Ja, Ko, De)
- Compatibilidad con la mayoría de los tipos de restauraciones más comunes
- Arquitectura abierta para exportar a cualquier sistema CAD dental abierto

HeronClinic es un paquete de software de escaneo y gestión de archivos muy intuitivo que se incluye con el escáner intraoral HeronIOS. Además de esto, el sistema le permite compartir datos con el laboratorio gracias a la solución en la nube HeronCloud. El software está diseñado para ser muy intuitivo, con una curva de aprendizaje muy rápida la cual se consigue un colaboración rápida y sencilla con el laboratorio.

Nuestra prioridad es su flexibilidad

Gracias a la posibilidad de escanear y exportar en formatos STL, OBJ y PLY a cualquier solución de software CAD del laboratorio, obtendrá una flexibilidad máxima para conectar y automatizar su configuración digital.

Red de Distribución Nacional

Medellín

 (604) 322 08 76
 317 645 14 06

Bogotá

 (601) 744 26 34
 317 586 07 69

  @bhsalud
 bhsaludtv

Barranquilla

 (605) 305 90 29
 318 353 07 19
317 426 68 86

Bucaramanga

 (607) 698 49 45
 316 656 05 45

Cartagena

 316 521 74 44
 317 426 68 86

Pasto

 317 668 96 91

Cali

 (602) 308 70 14
 318 361 10 65

Pereira

 (606) 321 67 57
 318 781 69 69

